


Kurzbedienungsanleitung für Notruftelefone

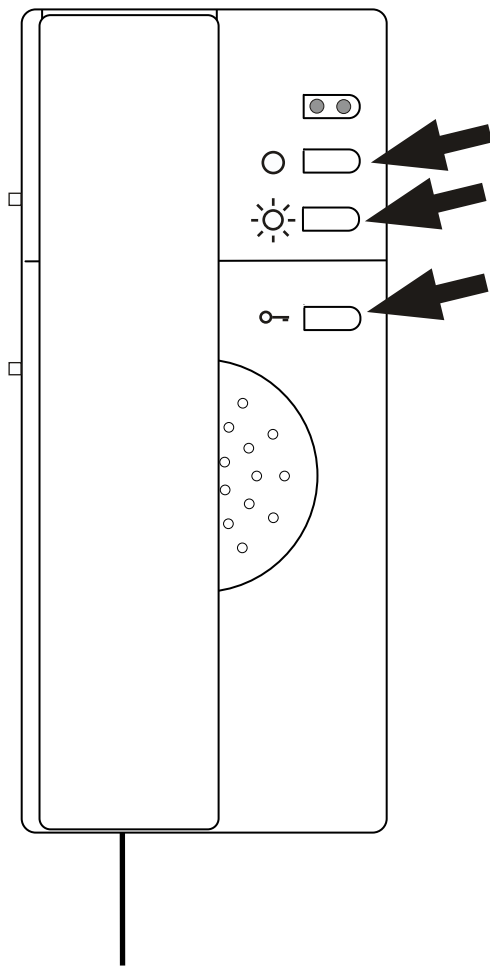

NOTFALL IM ZIMMER

Im Notfall, bitte den **Hörer aufgelegt lassen** und eine der drei Tasten betätigen.

WARTEN

Danach **warten Sie bitte** bis der **Rückruf** aus der Zentrale in der Pflegestation an Sie erfolgt.

RÜCKRUF

Beim **Rückruf** hören Sie einen **Ton** vom Telefon. Wenn es Ihnen **möglich** ist, nehmen Sie den **Hörer in die Hand und sprechen** mit der Pflegestation. Sollte es Ihnen **nicht möglich** sein den Hörer in die Hand zu nehmen, dann **warten Sie einfach** einen Moment. Die **Pflegestation** wird Sie dann **über** den eingebauten **Lautsprecher ansprechen**. (Rückfrage in das Zimmer)

NOTFALL IM BAD

Betätigen Sie zum Notruf den **Notruftaster**.

WARTEN, RÜCKRUF, LAUTSPRECHEN

Der weitere Ablauf ist wie beim Notruf über das Telefon beschrieben.

LAUTSPRECHEN

Zu **Beginn der Rückfrage** hören Sie einen **Hinweiston** und **dann** die **Durchsage** von der Pflegestation. Sollte es Ihnen **jetzt möglich** sein, nehmen Sie bitte den **Hörer in die Hand und sprechen** mit der Pflegestation. Wenn das **nicht möglich** ist **warten** Sie bitte bis zum **Ende der Durchsage**. Mit dem Ende der Durchsage hören Sie einen **weiteren Hinweiston**. **Jetzt können Sie frei sprechen** und die **Pflegestation kann Sie verstehen**.

Technische Änderungen vorbehalten

Allgemeine Gerätebeschreibung für Notruftelefone

Übersicht der Bedienelemente des TTN30-WS02

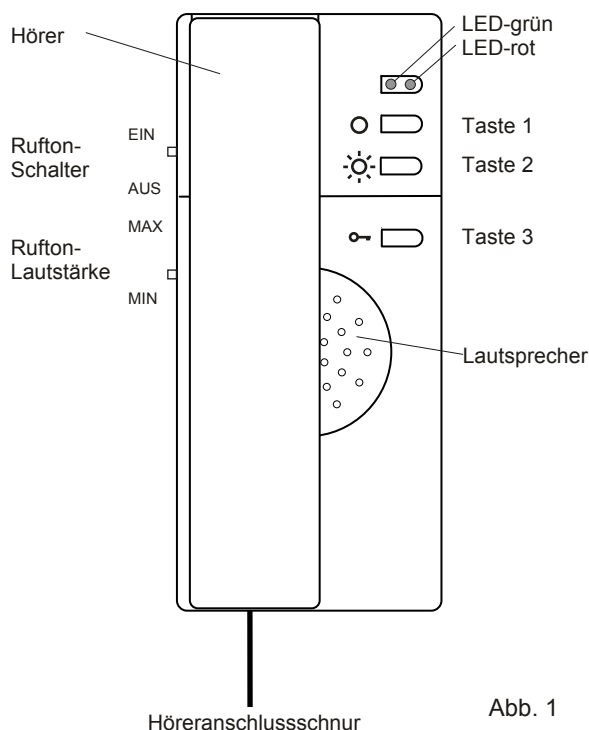


Abb. 1

Kurzbeschreibung der Bedienelemente

Hörer

Mit dem Hörer wird die Übertragung der Sprache erreicht. Er kann sich in den Positionen EINGEHÄNGT oder AUSGEHÄNGT befinden.

Lautsprecher

Über den Lautsprecher werden die Ruftöne für das Klingeln von der Haustür, von der Wohnungstür oder von einem internen Anruf übertragen. Sollte die Durchsagefunktion im Gerät aktiviert sein, wird durch den Lautsprecher die Durchsage übertragen.

Ruftonschalter

In der Stellung EIN sind die Ruftöne hörbar. In der Stellung AUS sind die Ruftöne nicht hörbar. Gleichzeitig zeigt die LED-rot den abgeschalteten Rufton an. Bei aktivierter Durchsagefunktion spielt die Stellung des Ruftonschalters keine Rolle.

Ruftonlautstärke

Mit dem Regler kann die Lautstärke der Ruftöne stufenlos zwischen den Werten MIN und MAX eingestellt werden. Völliges Abschalten der Lautstärke ist mit dem Regler nicht möglich! Bei aktivierter Durchsagefunktion spielt die Stellung des Reglers keine Rolle. Die Durchsage wird immer mit maximaler Lautstärke erfolgen.

LED-rot

Die rote LED kann verschiedene Funktionen haben. Die Grundfunktion im Auslieferungszustand des Gerätes ist die Anzeige der Stellung des Ruftonschalters. Ruftonschalter=EIN, die rote LED leuchtet nicht. Ruftonschalter=AUS, die rote LED leuchtet.

LED-grün

Ist der Hörer aufgelegt und die grüne LED leuchtet, wurde das Telefon von der Haustür oder einem internen Telefon gerufen. Die Aktivierungsdauer wird von der Türstation gesteuert.

Taste 1, Taste 2, Taste 3

Die Funktion der Tasten ist gleich. Beim Betätigen wird die Pflegestation gerufen. Diese meldet sich dann mit einem Rückruf bei Ihnen.

Anschlussschnur und Anschlussdose

Das Telefon wird über eine Anschlussschnur an die Telefonsteckdose für Notruftelefone angeschlossen. Sind mehrere Anschlussdosen in der Wohnung installiert, dann kann das Telefon auch umgesteckt werden. Das Telefon sollte immer angeschlossen sein. Die Anlage prüft automatisch die Telefone und meldet fehlende oder defekte Geräte an die Hausverwaltung.

Technische Änderungen vorbehalten